



Guide for Use

VaPro Pocket™
No Touch Intermittent Catheter



VaPro Pocket™
No Touch Intermittent Catheter

Assemble all equipment and prepare the area.



- 1** Wash your hands as advised by your healthcare practitioner.
- Position yourself to carry out intermittent catheterization. Manipulate your clothing to access your genitalia.



- 2** To open package, pull finger hole toward you and all the way down.



- 3** Remove the catheter from the package. Leave pack on the lap, sink or other flat surface. Lay catheter on opened package.



- 4** Hold the penis with your non-dominant hand and don't let go until you have finished the procedure. Pull back foreskin (if present) and cleanse the glans and opening of urethra as instructed by your healthcare practitioner.




- 5** Remove the cap from the protective tip of catheter.



- 6** Hold the catheter in one hand, and with the other hand advance the catheter forward until tip of the catheter fills the protective tip, taking care that the catheter does not protrude from the tip.

Grasp catheter below protective tip plate.

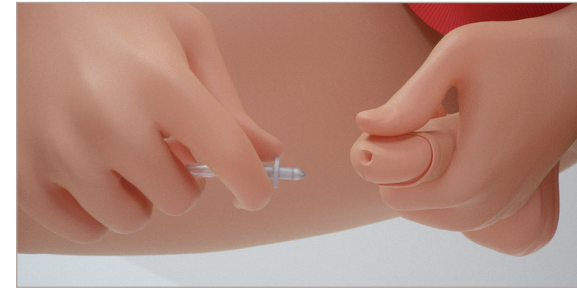

- 7** Using your forefinger and thumb of your non-dominant hand squeeze penis gently to open the urethral opening. With your dominant hand, insert the protective tip until the plate comes in contact with urethral opening.




- 8** With the penis stretched and in upright position, insert the catheter forward until urine starts to flow.

Once urine flow has stopped, slowly withdraw the catheter. If urine flows again, pause until urine stops. After you're sure the bladder is empty, remove the catheter completely. Reposition the foreskin (if present).



- 9** Catheter may be disposed of in a waste bin. DO NOT FLUSH DOWN TOILET.

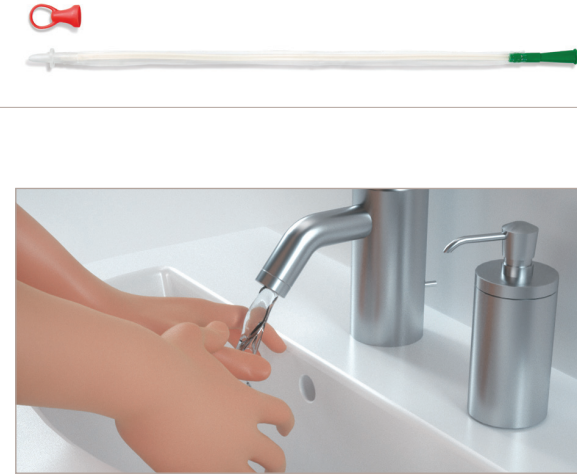

- 10** Wash your hands.

WARNING: To help reduce the potential for infection and/or other complications, do not reuse.

WARNING: If discomfort or any sign of trauma occurs, discontinue use immediately and consult your healthcare practitioner.

DESCRIPTION:

- Ready-to-use, single-use closed system intermittent catheter
- Hydrophilic-coated, Phthalate-free catheter
- Protective tip and sleeve supports no-touch insertion technique
- 2 smooth catheter eyelets
- Color-coded connector indicates catheter size
- Easy-to-remove ring cap
- 1000 mL collection bag
- Not made with natural rubber latex.

INDICATIONS FOR USE: This intermittent catheter is a flexible tubular device that is inserted through the urethra by male, female and pediatric patients who need to drain urine from the bladder.

PRECAUTION: Please consult your healthcare practitioner before using this product if any of the following conditions are present:

- Severed urethra
- Unexplained urethral bleeding
- Pronounced stricture
- False passage
- Urethritis – inflammation of the urethra
- Prostatitis – inflammation of the prostate gland
- Epididymitis – inflammation of the epididymis (testicle tube)

PRECAUTION: Self-catheterization should follow the plan of care and advice given by your healthcare practitioner and be carried out only in accordance with the instructions for use provided. Because catheterization frequency varies by person, the recommended frequency of your catheterization should be provided by your healthcare practitioner. For any other questions about your catheterization, please contact your healthcare practitioner.

Rx Only.

NOTE: Store boxes in a flat position and at normal room temperature.

This product consists of polyurethane sleeve, thermoplastic elastomer tip, and tubing not made with DEHP.

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060
www.hollister.com

Hollister, the Hollister logo and VaPro Pocket are trademarks of Hollister Incorporated.
©2022 Hollister Incorporated. 923519-1022 US-01834



Guía de uso

VaPro Pocket™
No Touch Intermittent Catheter



VaPro Pocket™
No Touch Intermittent Catheter

Reúna todos los materiales y prepare la zona.



1 Lávese las manos según las indicaciones de su profesional de la salud.

Colóquese para realizar un cateterismo intermitente. Manipule la ropa para acceder a los genitales.



2 Para abrir el envase, tire hacia usted y hacia abajo del orificio para el dedo.



3 Extraiga la sonda del envase. Deje el envase en el regazo, el fregadero u otra superficie plana. Coloque la sonda en el envase abierto.



4 Sujete el pene con su mano no dominante y no lo suelte hasta que haya terminado el procedimiento. Tire hacia atrás del prepucio (si lo hubiera) y limpie el glande y la abertura de la uretra según las instrucciones de su profesional de la salud.




5 Retire el tapón de la punta protectora de la sonda.



6 Sujete la sonda con una mano y, con la otra mano, avance con ella hasta que la punta de la sonda llene la punta protectora; tenga cuidado de que la sonda no sobresalga de la punta.

Sujete la sonda por debajo de la placa de la punta protectora.

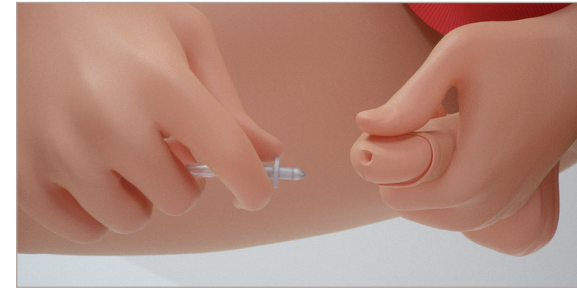

7 Con el dedo índice y el dedo pulgar de su mano no dominante, apriete suavemente el pene para abrir la abertura uretral. Con la mano dominante, inserte la punta protectora hasta que la placa entre en contacto con la abertura uretral.



8 Con el pene estirado y en posición vertical, inserte la sonda hacia delante hasta que la orina comience a fluir.

Una vez que se detenga el flujo de orina, retire la sonda lentamente. Si la orina fluye de nuevo, haga una pausa hasta que se detenga. Tras asegurarse de que la vejiga está vacía, retire la sonda por completo. Vuelva a colocar el prepucio (si lo hubiera).



9 La sonda se puede desechar en una papelera. NO LA TIRE POR EL INODORO.



10 Lávese las manos.

ADVERTENCIA: Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto.

ADVERTENCIA: En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpir inmediatamente el uso del producto y consultar a su profesional de la salud.

DESCRIPCION:

- Sonda intermitente de un solo uso, de sistema cerrado, lista para usar
- Sonda con recubrimiento hidrofílico sin ftalato
- Punta protectora y funda para la técnica de inserción no-tocar
- 2 orificios de drenaje suaves
- El conector con código de colores indica el tamaño de la sonda
- Tapón con anilla de fácil retirada
- Bolsa colectora de 1000 mL
- No contiene látex de caucho natural

INDICACIONES DE USO: Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se inserta por la uretra y se utiliza en los pacientes masculinos, femeninos y pediátricos que necesitan drenar la orina de la vejiga.

PRECAUCIÓN: Si presenta cualquiera de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto:

- Uretra seccionada
- Sangrado uretral de origen desconocido
- Estrechamiento uretral pronunciado
- Falsa vía uretral
- Uretritis – inflamación de la retra
- Prostatitis – inflamación de la próstata
- Epididimitis – inflamación del epidídimo (tubo testicular)

PRECAUCIÓN: La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de cateterizaciones varía en función de la persona, debería ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su cateterización, por favor, contacte con su médico.

Rx Only.

NOTA: Almacenar las cajas en posición horizontal y a temperatura ambiente.

Este producto consta de: funda de poliuretano, punta de elastómero termoplástico y tubos que no están fabricados con DEHP.

Hollister Incorporated

2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060
www.hollister.com

Hollister, El logotipo de Hollister y VaPro Pocket son marcas registradas de Hollister Incorporated.
©2022 Hollister Incorporated. 923519-1022 US-01834

